



Implantes testiculares

Implantes rellenos de gel de silicona o de elastómero de silicona suave, con casquete reforzada o guía de aguja, disponibles en cinco tamaños



Con casquete reforzado



Con guía de aguja

Implants made by POLYTECH – Quality made in Germany



Implantes testiculares, C€ 0483

Descripción del producto

Se suministran implantes testiculares de superficie lisa POLYsmooth™ de dos tipos, ambos adecuados para su fijación a los tejidos.

Los implantes rellenos de gel de silicona tienen una pequeña pieza de teflón para guiar la aguja y evitar la punción del implante.

Los implantes testiculares rellenos de elastómero de silicona suave tienen un casquete reforzado que permite la fijación del implante suturando a través de este.

Los implantes testiculares rellenos de gel de silicona o de elastómero de silicona suave están disponibles en 5 tamaños.

Información de los materiales

La capsula, que contiene una capa de barrera, está rellena con un gel de silicona con un alto grado de reticulación o una silicona altamente polimerizada. Ambos tipos de implantes tienen una superficie lisa.

La fabricación de los implantes esta basada en los estándares de calidad de acuerdo con las normativas ISO 9001 e ISO 13485. Todos los materiales usados son de una alta calidad médica.

Indicaciones

- Reconstrucción tras orquiectomía
- Reconstrucción tras traumatismo
- Corrección de asimetrías
- Defectos congénitos
- Sustitución de implantes


Implantes testiculares

Nº de pedido	Volumen (ml)	Dimensiones (cm)	
		A	B

Con guía de aguja, POLYsmooth™

Rellenos de gel de silicona, con superficie lisa, embalaje individual y estéril, C€ 0483


10100-005	5	2,0	2,2
10100-012	12	2,6	3,3
10100-021	21	3,2	4,2
10100-027	27	3,3	4,8
10100-036	36	3,9	5,0

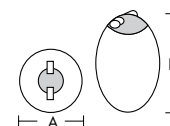

Con casquete reforzado, POLYsmooth™

Rellenos de elastómero de silicona suave, con superficie lisa, embalaje individual y estéril, C€ 0483

10101-005	5	2,0	2,2
10101-012	12	2,6	3,3
10101-021	21	3,2	4,2
10101-027 ¹	27	3,3	4,8
10101-036 ¹	36	3,9	5,0

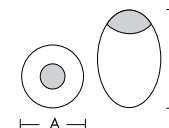

Medidas aproximadas

En inventario ¹ Entrega ≈ 6 semanas después de la orden

Información importante

Los implantes se entregan estériles y envasados individualmente.

¡Antes de cerrar la incisión, hay que extraer siempre la guía de aguja de teflón de los implantes rellenos de gel de silicona!

ATENCIÓN: Siga las instrucciones detalladas de uso incluidas con cada producto.

POLYTECH Health & Aesthetics GmbH

Altheimer Str. 32 • 64807 Dieburg • Alemania

☎ +49 (0) 60 71 98 63 0 • 📠 +49 (0) 60 71 98 63 30

✉ info@polytechhealth.com

www.polytechhealth.es

